


# แนะนำผลิตภัณฑ์ LabTech - Sample Preparation System

## Save Time & Solvent

### SepLine - Automatic Solid Phase Extraction System

เครื่องสกัดสารสำคัญอัตโนมัติ ด้วย Solid Phase Extraction (SPE)

- ใช้ clean up ตัวอย่างที่ได้จากสิ่งแวดล้อม, อาหาร, สมุนไพร, ยา และอื่นๆ เพื่อผลที่ถูกต้องและรวดเร็ว เมื่อนำไปวิเคราะห์ด้วย GC, HPLC และ MS
- วางตัวอย่างได้ 60 ตัวอย่าง และ clean up ได้ครั้งละ 1-4 ตัวอย่าง ในคราวเดียวกัน
- เครื่องมีส่วนประกอบของระบบฉีดและเก็บสารอัตโนมัติที่มีความแม่นยำสูง
- ลดเวลาการทำงานลงรวมถึงลดปริมาณ solvent ที่ใช้ในการสกัดสาร
- เลือกใช้ solvent ได้ถึง 8 ชนิด ต่อเนื่องกัน
- สามารถใช้ร่วมกับ SPE Column ขนาด 1,3,6 ml
- ควบคุมการทำงานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์

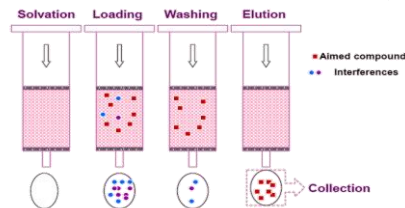

### HPSE® Gemini - High Performance Solvent Extractor System

เครื่องสกัดสารตัวอย่างโดยใช้สารละลายที่สภาวะความดันสูงแบบ อัตโนมัติ

- เหมาะสำหรับการสกัดสารที่ต้องการวิเคราะห์ออกจากตัวอย่างประเภทของแข็งและกึ่งของแข็งที่สภาวะความดันสูง เช่น อาหาร, สมุนไพร, ดิน, พลาสติก, ยาง เป็นต้น โดยสารที่ถูกสกัดจะผ่านการระเหยเพื่อปรับความเข้มข้นและผ่านการแยกให้บริสุทธิ์ด้วย Solid Phase Extraction (SPE)
- เทคนิคการสกัดอาศัยสภาวะความดันและอุณหภูมิ โดยสามารถทำ ความดันในช่วงการสกัดได้ถึง 17 Mpa (2,400 psi) และอุณหภูมิ สูงสุด 200 °C
- มีระบบทำให้สารเข้มข้น (On-line Concentration Module) โดยการระเหย ที่อุณหภูมิมระหว่าง 30 - 100 °C
- สามารถเลือกใช้ solvent ในระบบได้ถึง 8 ชนิด
- ควบคุมการทำงานผ่านจอ Touch-screen หรือเครื่องคอมพิวเตอร์



**New**



ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนบริษัท หรือ บริษัท ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิก จำกัด  
Tel : 02-986-1250-4 Fax : 02-986-1255, 02-986-1243  
Email : [sales@fortunesoci.com](mailto:sales@fortunesoci.com) หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : [www.fortunesoci.co.th](http://www.fortunesoci.co.th)